



SenSura[®] Mio 2-piece Click

Pictorial instructions for use

SenSura[®] Mio

 **Coloplast**


Abbreviated instructions for use. Please refer to product labeling for complete product instructions for use, contraindications, warnings, precautions and adverse events.

Prepare — 1



Measure the stoma.

Prepare — 3

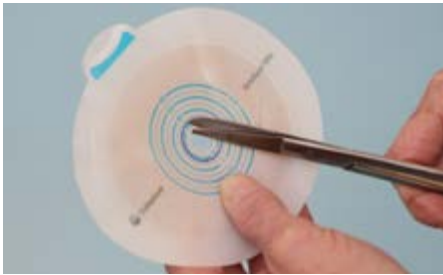

Cut opening in the barrier.

Apply — 1



Center barrier.

Apply — 3




Prepare — 2



Trace measurement onto back of the barrier.

Prepare — 4

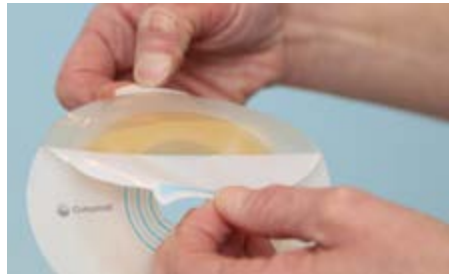

Remove protective backing by pulling the turquoise release tab away from the barrier.

Apply — 2



Place pouch on the barrier starting at the bottom flange. Gently press pouch into place while moving toward the top of the barrier with both hands.

Secure pouch by pinching the two ends of tab together on the click lock security ring. You will hear a click when it locks.

When pouch is $\frac{1}{3}$ to $\frac{1}{2}$ full, proceed to either **empty** or **remove**.

For drainable pouches only

Empty — 1



Open the outlet by lifting both tabs off the Velcro® plate. Unfold outlet.

Empty — 2



Fold back lower plate to avoid soiling when emptying. Attach Velcro® dots to hold plate in place.

Empty — 3



Empty pouch by pinching outer edges of the outlet open.

Empty — 4



Clean the outlet.

Close — 1



Release the Velcro® dots. Using the guide, fold the lower plate over the upper plate.

Close — 2



Fold upward. Seal the outlet by attaching the Velcro® tabs onto the Velcro® plate.

Remove - 1



Open the security ring by pressing the underside of the turquoise tab with your thumb or fingertip.

Remove - 2



Remove pouch from barrier by grasping the ring at the top of the pouch and pulling downward with a smooth "up-and-over" motion.

Remove - 3



Use the white tab to gently pull the barrier away from the skin using the "push-pull" technique.

For product support, call the Coloplast Consumer Care Team at 1-877-858-2656.



Coloplast develops products and services that make life easier for people with very personal and private medical conditions. Working closely with the people who use our products, we create solutions that are sensitive to their special needs. We call this intimate healthcare. Our business includes ostomy care, urology and continence care and wound and skin care. We operate globally and employ more than 10,000 people.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S.
© 2016 Coloplast Corp. All rights reserved.

Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

Features

Hide-away



Hide-away: Tuck sealed outlet up and under the protective pocket.

For extra discretion: Adhere the closed outlet on a drainable pouch to the Velcro® dot near inspection window.



Apply teal sticker to exposed part of the filter, on the back of the pouch, before showering, swimming or submerging in water. Remove sticker when done. Stickers come in the box of pouches.



Sujetador de 2 piezas **SenSura[®] Mio**

Instrucciones de uso con imágenes

SenSura[®] Mio

 **Coloplast**

Instrucciones de uso abreviadas. Consulte el prospecto del producto para conocer las instrucciones completa para su uso, las contraindicaciones, las advertencias, las precauciones y los eventos adversos.

Prepare — 1



Mida el estoma.

Prepare — 3



Corte una abertura en la barrera.

Aplique — 1



Centre la barrera.

Aplique — 3



Prepare — 2



Realice el rastreo de la medición en la parte trasera de la barrera.

Prepare — 4



Retire el reverso protector tirando de la pestaña de liberación de color turquesa en dirección opuesta a la barrera.

Aplique — 2



Coloque la bolsa sobre la barrera a partir de la brida inferior. Presione suavemente la bolsa para colocarla en su lugar mientras se mueve hacia la parte superior de la barrera con ambas manos.

Fije la bolsa uniendo los dos extremos de la pestaña sobre el anillo de seguridad de bloqueo del sujetador. Oirá un clic cuando se bloquee.

Cuando la bolsa es entre $\frac{1}{3}$ a $\frac{1}{2}$ llena, proceda a **vaciarla** o **quitarla**.

Para bolsas con drenaje solamente

Vacíe — 1



Abra la salida tirando de ambas pestañas hacia arriba de la placa Velcro®. Despliegue la salida.

Vacíe — 2



Pliegue hacia atrás la placa inferior para evitar ensuciarse durante el vaciado. Una los puntos de Velcro® para sujetar la placa en su lugar.

Vacíe — 3



Vacíe la bolsa tomando los bordes externos de la salida y manteniéndolos abiertos.

Vacíe — 4



Limpie la salida.

Cierre — 1



Suelte los puntos Velcro®. Mediante el uso de la guía, doble la placa inferior sobre la placa superior.

Cierre — 2



Doble hacia arriba. Selle la salida mediante la colocación de las pestañas de Velcro® sobre la placa de Velcro®.

Quite — 1



Abra el anillo de seguridad presionando la parte inferior de la pestaña de color turquesa con el pulgar o el dedo.

Quite — 2



Retire la bolsa de la barrera agarrando el anillo en la parte superior de la bolsa y tirando hacia abajo con un movimiento suave "hacia arriba y por encima".

Quite — 3



Use la pestaña de color blanco para retirar la barrera de la piel mediante una técnica de "empuje-tire".

Para obtener asistencia con respecto al producto, llame al Equipo de Cuidado del Consumidor de Coloplast al 1-877-858-2656.



Coloplast desarrolla productos y servicios que facilitan la vida de las personas que presentan afecciones médicas muy personales y privadas. Al trabajar en estrecha colaboración con las personas que utilizan nuestros productos, creamos soluciones que son sensibles a sus necesidades especiales. Nos referimos a esto como "atención médica íntima". Nuestra empresa abarca la atención de ostomías, urología y continencias, además del cuidado de la piel y las heridas. Operamos en todo el mundo y contamos con más de 10,000 empleados.

El logotipo de Coloplast es una marca comercial registrada de Coloplast A/S. © 2016 Coloplast Corp. Todos los derechos reservados.

Velcro® es una marca comercial registrada de Velcro Industries B.V.

Características

Oculta



Oculta: Lleve la salida sellada hacia arriba y hacia abajo del bolsillo de protección.

Para mayor discreción: Adhiera la salida cerrada sobre una bolsa con drenaje al punto de Velcro® próximo a la ventana de inspección.



Aplique la etiqueta engomada de color verde azulado a la parte expuesta del filtro, en la parte posterior de la bolsa, antes de ducharse, nadar o sumergirse en el agua. Retire la etiqueta cuando haya terminado. Las etiquetas engomadas se proveen dentro de la caja de las bolsas.