

SenSura[®] Mio 2-piece Click Urostomy

Pictorial guide




Please refer to product labeling for complete product instructions for use, contraindications, warnings, precautions and adverse events.

Prepare — 1



Measure the stoma.

Prepare — 3

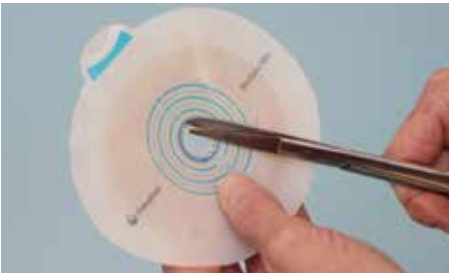

Cut opening in the barrier.

Apply — 1



Center barrier around stoma. Secure to skin by applying gentle pressure.

Apply — 3



Prepare — 2



Trace measurement onto back of the barrier.

Prepare — 4



Remove protective backing by pulling the turquoise release tab away from the barrier.

Apply — 2



Place pouch on the barrier starting at the bottom flange. Gently press pouch into place while moving toward the top of the barrier with both hands.

Secure pouch by pinching the two ends of the tab together on the click lock security ring. You will hear a click when it locks.

When pouch is 1/3 to 1/2 full, proceed to empty.

Empty — 1



Empty the urostomy pouch by holding the end of the outlet upwards. Pinch spout to control drainage and remove the plug. Direct the spout and release to drain.

Remove - 1



Open the security ring by pressing the underside of the turquoise tab with your thumb or fingertip.

Remove - 3



Use the white "soft-feel" tab on the barrier to gently pull the barrier away from the skin using the "push-pull" technique.

Empty — 2



The Coloplast urostomy night bag can be attached for bedside drainage. If using a different drain bag, you may need an adaptor.

Remove - 2



Remove pouch from barrier by grasping the top of the pouch and pulling downward with a smooth "up-and-over" motion.

**For product support, call the
Coloplast Consumer Care Team at
1-877-858-2656.**



Coloplast develops products and services that make life easier for people with very personal and private medical conditions. Working closely with the people who use our products, we create solutions that are sensitive to their special needs. We call this intimate healthcare. Our business includes ostomy care, urology and continence care and wound and skin care. We operate globally and employ more than 11,000 people.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S.
© 2018 Coloplast Corp. All rights reserved.
Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

Brava®

“Brava® Elastic Barrier Strips provide that *extra security.*”

Keagan*, 27

* Keagan is a Brava user who has received compensation from Coloplast to provide this information



Try the Brava® Elastic Barrier Strip XL

Keagan uses **Brava Elastic Barrier Strips** for a greater sense of security

Skin creases, folds and moisture can make keeping your ostomy barrier in place difficult. Skin-friendly Brava Elastic Barrier Strips keep barriers secure and prevent edges from lifting and rolling.

Now, a larger size is available!

Brava Elastic Barrier Strip XL provides an even larger adhesive area for a greater sense of security.



Brava® Elastic Barrier Strip XL

- ✔ Provides a larger adhesive area, for an increased feeling of security
- ✔ Supports longer wear time
- ✔ Absorbs moisture during movement

To learn more and request free samples

Call us toll-free at 1-833-806-9893 or go to www.coloplast.us/ebs-xl-offer

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast Corp. Minneapolis, MN 55411 / 1-800-533-0464

www.coloplast.us The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S.
© 2018 Coloplast Corp. All rights reserved.



PM-04779 M6123N 10.18

SenSura® Mio

 Coloplast

Urostomía de cierre a presión y 2 componentes SenSura® Mio

Guía ilustrada




Consulte el prospecto del producto para conocer las instrucciones completas para su uso, las contraindicaciones, las advertencias, las precauciones y los eventos adversos.

Prepare: 1



Mida el estoma.

Prepare: 3

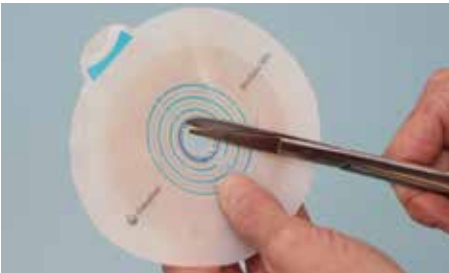

Corte una abertura en la barrera.

Aplique: 1



Centre la barrera alrededor del estoma. Fije a la piel ejerciendo una presión suave.

Aplique: 3



Prepare: 2



Marque la medición en la parte trasera de la barrera.

Prepare: 4



Retire el reverso protector tirando de la pestaña de liberación de color turquesa en dirección opuesta a la barrera.

Aplique: 2



Coloque la bolsa sobre la barrera a partir de la brida inferior. Presione suavemente la bolsa para colocarla en su lugar mientras se mueve hacia la parte superior de la barrera con ambas manos.

Fije la bolsa uniendo los dos extremos de la pestaña sobre el anillo de seguridad de bloqueo del sujetador. Oirá un clic cuando se bloquee.

Vacíe la bolsa cuando esté llena entre un tercio y la mitad.

Vacíe: 1



Vacíe la bolsa de urostomía sosteniendo el extremo de la salida hacia arriba. Pellizque el pico para controlar el drenaje y retire el tapón. Dirija el pico y suelte para el drenaje.

Vacíe: 2



La bolsa nocturna de urostomía de Coloplast se puede fijar para el drenaje en la cabecera. Si usa una bolsa de drenaje diferente, es posible que necesite un adaptador.

Retire: 1



Abra el anillo de seguridad presionando la parte inferior de la pestaña de color turquesa con el pulgar o el dedo.

Retire: 2



Retire la bolsa de la barrera agarrando el anillo en la parte superior de la bolsa y tirando hacia abajo con un movimiento suave "hacia arriba y por encima".

Retire: 3



Use la pestaña de color blanco para retirar la barrera de la piel mediante una técnica de "empuje—tire".

Para obtener asistencia con respecto al producto, póngase en contacto con el Equipo de atención al consumidor de Coloplast al 1-877-858-2656.



Coloplast desarrolla productos y servicios que facilitan la vida de las personas que presentan afecciones médicas muy personales y privadas. Al trabajar en estrecha colaboración con las personas que usan nuestros productos, creamos soluciones que son sensibles a sus necesidades especiales. Nos referimos a esto como «atención médica íntima». Nuestra empresa abarca el cuidado de ostomías, urología e incontinencia, además del cuidado de la piel y las heridas. Operamos en todo el mundo y contamos con más de 10 000 empleados.

El logotipo de Coloplast es una marca comercial registrada de Coloplast A/S.
© 2018 Coloplast Corp. Todos los derechos reservados.
Velcro® es una marca comercial registrada de Velcro Industries B.V.

Brava®

«Las Tiras de barrera elástica Brava® ofrecen esa seguridad adicional que necesitas».

Keagan*, 27

* Keagan es un usuario de Brava que recibió una remuneración de parte de Coloplast por brindar esta información.

Pruebe la Tira de barrera elástica extra grande (XL) Brava®

Keagan usa las **Tiras de barrera elástica Brava** para lograr una mayor sensación de seguridad

Los huecos, los pliegues y la humedad de la piel pueden dificultar el mantenimiento de la barrera de ostomía en su lugar. Las Tiras de barrera elástica Brava que no perjudican la piel fijan y evitan que los bordes se levanten y se enrollen.

¡Ahora cuenta con un tamaño más grande disponible!

La **Tira de barrera elástica extra grande (XL) Brava** ofrece un área de adhesivo aún más grande para una mayor sensación de seguridad.



Tira de barrera elástica **extra grande (XL) Brava®**

- ✓ Ofrece un área de adhesivo aún más grande para una mayor sensación de seguridad.
- ✓ Se puede usar por más tiempo
- ✓ Absorbe la humedad durante el movimiento

Para obtener más información y solicitar muestras sin cargo llámenos a la línea gratuita 1-833-806-9893 o visite www.coloplast.us/ebs-xl-offer

Cuidado de la ostomía/Cuidado de la continencia/Cuidado de heridas y la piel/Urología intervencionista

Coloplast Corp. Minneapolis, MN 55411/1-800-533-0464

www.coloplast.us El logotipo de Coloplast es una marca comercial registrada de Coloplast A/S.

© 2018 Coloplast Corp. Todos los derechos reservados.

 **Coloplast**

PM-04779 M6123N 06.18