

SenSura® Mio

 **Coloplast**

SenSura® Mio 2-piece Flex Uro

Pictorial guide




Please refer to product labeling for complete product instructions for use, contraindications, warnings, precautions and adverse events.

Prepare — 1



Measure the stoma.

Prepare — 2

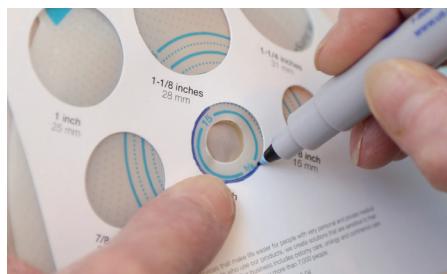

Trace measurement onto back of the barrier.

Prepare — 3



Cut opening in the barrier.

Prepare — 4



Remove protective backing by pulling the turquoise release tab away from the barrier.

Apply — 1



Center barrier around stoma. Secure to skin by applying gentle pressure.

Apply — 2



Remove the protective backing from the adhesive ring on the pouch.

Apply — 3



Place pouch by aligning the bottom edge of the adhesive ring with the turquoise line at the bottom of the floating barrier.

Apply — 4



Secure pouch by applying gentle pressure around the barrier.

*Note: Per the Wound, Ostomy & Continence Nurse Society guideline, empty or remove the pouch when it's 1/3 to 1/2 full.

Empty — 1



Empty the urostomy pouch by holding the end of the outlet upwards. Pinch spout to control drainage and remove the plug. Direct the spout and release to drain.


Empty — 2



The Coloplast urostomy night bag can be attached for bedside drainage. If using a different drain bag, you may need an adaptor.

**For product support, call the Coloplast
Consumer Care Team at 1-877-858-2656.**

Remove - 1

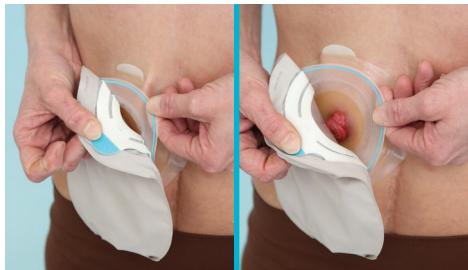

Remove pouch by using the turquoise tab located on the adhesive ring and gently pull down and away.

Remove - 2



Use the white tab to gently pull the barrier away from the skin using the "push-pull" technique.

SenSura® Mio

 Coloplast

SenSura® Mio 2-piece Flex Uro

Instrucciones de uso con imágenes




Consulte el prospecto del producto para conocer las instrucciones completas para su uso, las contraindicaciones, las advertencias, las precauciones y los eventos adversos.

Prepare — 1



Mida el estoma.

Prepare — 2

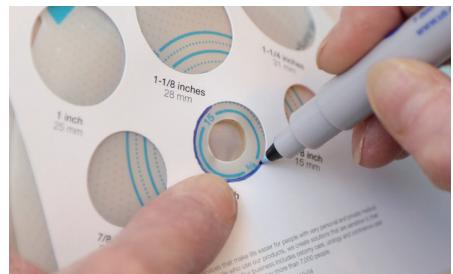

Marque la medida en la parte trasera de la barrera.

Prepare — 3




Corte una abertura en la barrera.

Prepare — 4



Retire el reverso protector tirando de la pestaña de liberación de color turquesa en dirección opuesta a la barrera.

Aplique — 1

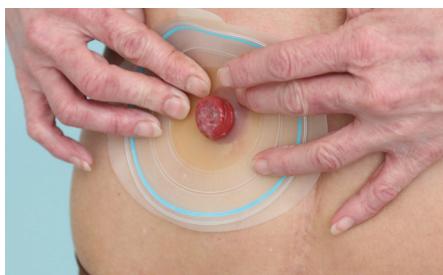

Centre la barrera alrededor del estoma. Fije a la piel ejerciendo una presión suave.

Aplique — 2



Quite el papel protector del anillo adhesivo sobre la bolsa.

Aplique — 3



Coloque la bolsa mediante la alineación del borde inferior del anillo adhesivo con la línea de color turquesa en la parte inferior de la placa base flotante.

Aplique — 4



Fije la bolsa ejerciendo una presión suave alrededor de la placa base.

Cuando la capacidad de la bolsa esté entre 1/3 a 1/2 llena, proceda a vaciarla o quitarla.

Vacíe — 1



Vacíe la bolsa de urostomía sosteniendo el extremo de la salida hacia arriba. Pellizque el pico para controlar el drenaje y retire el tapón. Dirija el pico y suelte para el drenaje.

Vacíe — 2



La bolsa nocturna de urostomía Coloplast se puede fijar para el drenaje en la cabecera. Si utiliza una bolsa de drenaje diferente, es posible que necesite un adaptador.

Para obtener asistencia con respecto al producto, póngase en contacto con el Equipo de atención al consumidor de Coloplast al 1-877-858-2656.

Quite — 1



Quite la bolsa usando la pestaña azul ubicada sobre el anillo adhesivo y tirando suavemente hacia abajo y hacia afuera.

Quite — 2



Use la pestaña de color blanco para retirar la barrera de la piel mediante una técnica de "empuje—tire".

Cuidado de la ostomía/Cuidado de la incontinencia/Cuidado de la piel y heridas/Cuidado para urología

Coloplast Corp. Minneapolis, MN 55411 | 1-800-533-0464

www.coloplast.us El logotipo de Coloplast es una marca comercial registrada de Coloplast A/S. © 2019 Coloplast Corp. Todos los derechos reservados.

Velcro® es una marca comercial registrada de Velcro Industries B.V.

 **Coloplast**

PM-02592 M6248 12.19